


# 日本首次获得认可的角膜塑形镜



## 科学技术

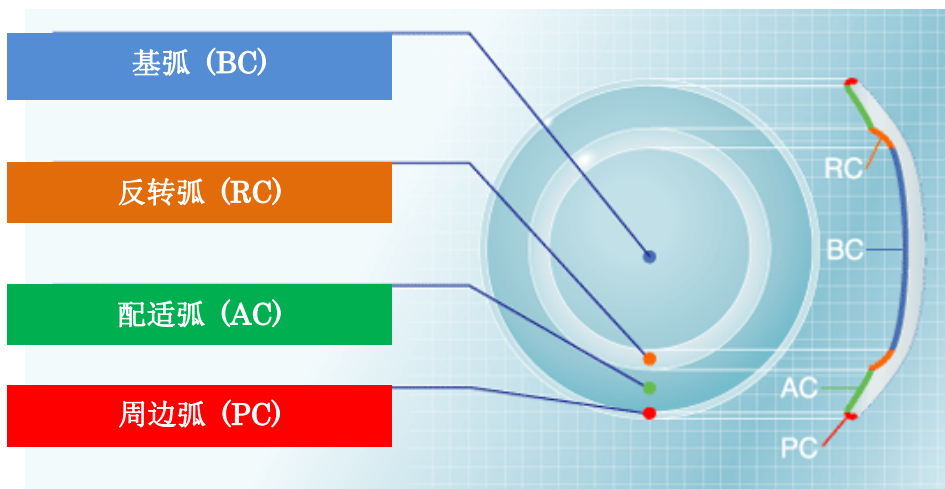

**基弧 (BC)** 配合患者的度数 (目标矫正值) 压住角膜前部使其平坦化。

**配适弧 (AC)** 保持镜片的中心位置, 促进获得充分的屈折矫正作用。此两个弧度的压力使角膜产生变化。

**反转弧 (RC)** 为再分布角膜上皮细胞的部位, 调整基弧和配适弧的压力。

**周边弧 (PC)** 促进泪液流通, 助于容易摘取镜片。

## 商品简介

试镜成套

- ▶ 20/40/80/120 片装
- ▶ 试戴便览
- ▶ 提供患者用促销资料



α ORTHO-K 镜片

- ▶ 基于患者自身的规格特别订制
- ▶ 刻有便于区别镜片的专印



护理用品

- ▶ ORTHO 护理液 120ml
  - 最适合用于角膜塑形镜的洗净·保存
  - 仅此 1 瓶简单护理
  - 抗菌效果



- ▶ ORTHO-K 成套 (起用初套)
  - ORTHO 护理液 120ml
  - 镜片专用盒
  - 小吸管
  - 防漏塞

